

ОМОЛОЖЕНИЕ,
ОСВЕТЛЕНИЕ
И ВОССТАНОВЛЕНИЕ
СИЯНИЯ КОЖИ


CYTOCARE S Line

РУ No P3H 2022/17626

CYTOCARE
HYALURONIC ACID 18 mg + REJUVENATING COMPLEX
S Line

LABORATOIRE
REVITACARE
FRANCE

1 x 3 ml
MADE IN FRANCE

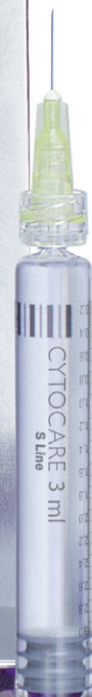

CYTOCARE
HYALURONIC ACID 18 mg + REJUVENATING COMPLEX
S Line

1 x 3 ml
MADE IN FRANCE

LABORATOIRE
REVITACARE
FRANCE

MADE IN FRANCE
1 x 3 ml


LABORATOIRE
REVITACARE
FRANCE

СДЕЛАНО ВО ФРАНЦИИ

CYTOCARE
S Line

ОМОЛОЖЕНИЕ, ОСВЕТЛЕНИЕ
И ВОССТАНОВЛЕНИЕ
СИЯНИЯ КОЖИ

- Для мужчин и женщин
- Для любого типа кожи
- Для любого возраста,
от юной до зрелой кожи

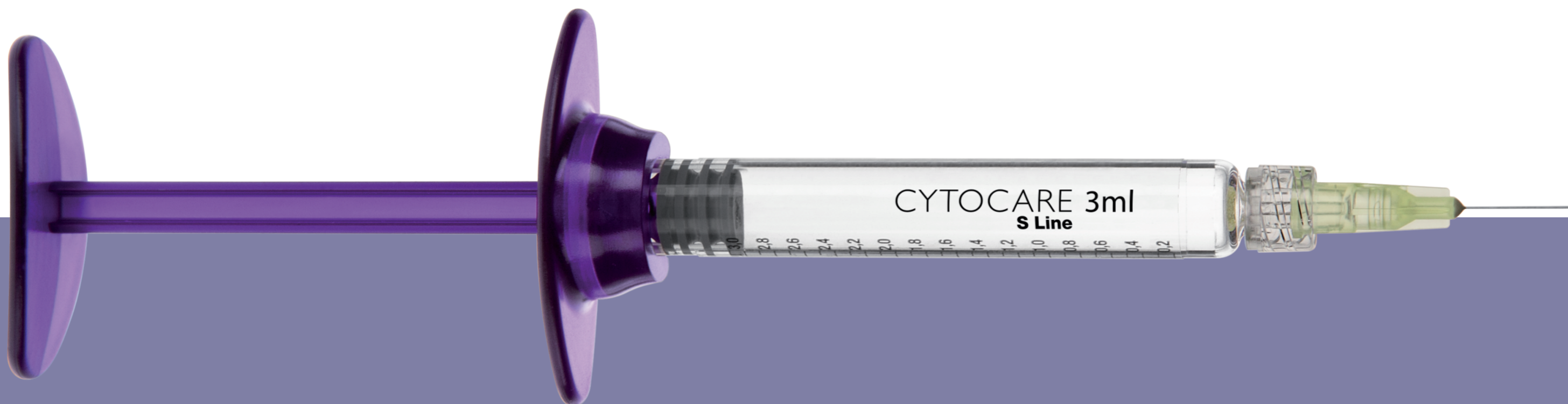

УВЛАЖНЕНИЕ
АНТИОКСИДАНТНАЯ ЗАЩИТА
ВОССТАНОВЛЕНИЕ СИЯНИЯ КОЖИ

CYTOCARE S Line


Антиоксидантная и увлажняющая формула моментально осветляет кожу, придает ей сияние и восстанавливает ее физико-химические свойства. Результат процедуры с применением данного препарата всегда гармоничный и естественный.

Первый бустер для кожи, стерилизованный методом асептической фильтрации, представленный в предварительно заполненном шприце для защиты целостности всех компонентов.

Cytocare S Line — больше, чем anti-age продукт. Он обладает и поверхностным, и глубоким синергическим действием для оптимальной ревитализации кожи.

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ФОРМУЛА

НЕРЕТИКУЛИРОВАННАЯ ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА 18 МГ + ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС СТ50*

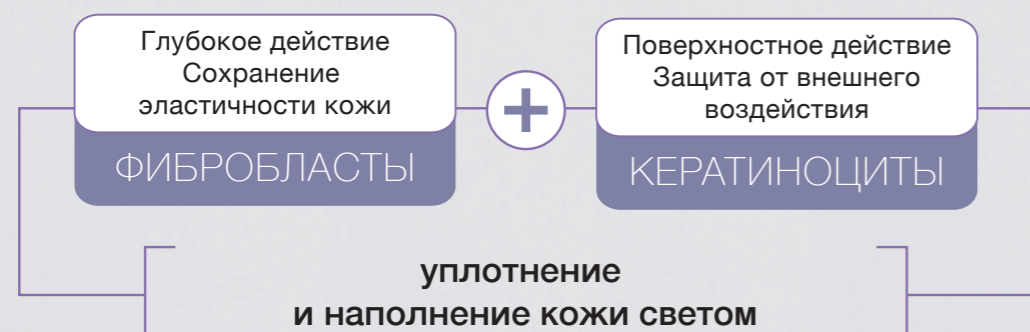

* Микроэлементы: молибден, ванадий, кальций, золото, калий, медь, магний, марганец, натрий, фосфор, кремний, селен, никель, цинк, олово. Аминокислоты: аланин, аргинин, аспарагин, цистеин, глутамин, глутаминовая кислота, глицин, гистидин, изолейцин, лейцин, лизин, метионин, фенилаланин, пролин, серин, треонин, триптофан, тирозин, валин. Поливитаминный комплекс: холин, витамины B₁, B₂, B₃, B₄, B₅, B₆, B₇, B₈, B₉, B₁₂. Другие компоненты: тимидин, путресцин, липоевая кислота.

ОПТИМИЗАЦИЯ

СУТОСАРЕ S Line действует благодаря эксклюзивной формуле**

Оптимизация антиоксидантных свойств гиалуроновой кислоты омолаживающим комплексом

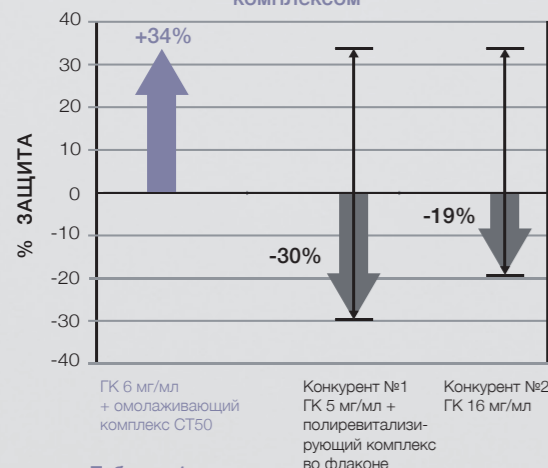


Таблица 1

Единственный продукт с доказанной антиоксидантной активностью

Оптимизация увлажняющего действия гиалуроновой кислоты омолаживающим комплексом

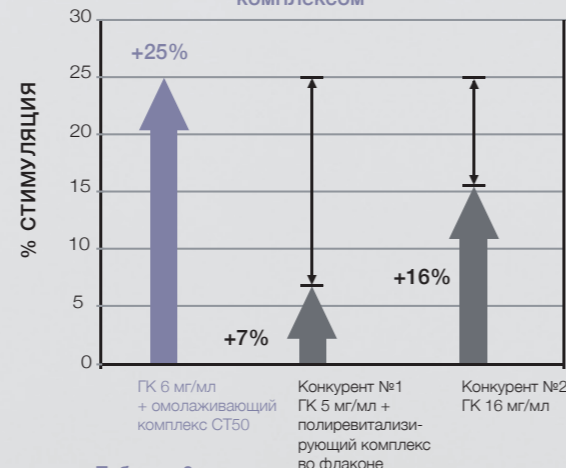


Таблица 2

Обладает выраженным увлажняющим действием

ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В течение исследования доказано, что только СУТОСАРЕ S Line эффективно защищает кератиноциты от свободных радикалов. Он является единственным препаратом, оказывающим активное антиоксидантное действие.

ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В течение исследования только СУТОСАРЕ S Line значительно стимулировал выработку собственных гликозаминогликанов (ГАГ), что доказывает более выраженный увлажняющий эффект.

**in vitro исследования проводились в независимых французских лабораториях



* Мультицентровые клинические исследования на 110 пациентах. Протокол: 3 процедуры с интервалом в 3 недели.

ПЕРЕНОСИМОСТЬ

СУТОСARE S Line обладает хорошей переносимостью

Во время проведения исследований у испытуемых отмечалось появление стандартных побочных эффектов, свойственных всем инъекционным методикам — небольшие синяки, болезненность и краснота. Более выраженных изменений кожи не отмечалось. Сам препарат пациентом не ощущался.

УПАКОВКА

- Стерильный одноразовый градуированный шприц объемом 3 мл
- В блистере находятся 2 мезотерапевтические иглы калибром 30G

ВИДИМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

ДО



ПОСЛЕ



ТЕХНИКИ

- Папульная
- Мультиболюсная техника
- Папула за папулой («жемчужное ожерелье»)

ПРОТОКОЛ

- Внутридермальные инъекции
- Область применения: лицо, шея, декольте, кисти рук и др.
- Протокол лечения: 3 процедуры с интервалом в 3 недели
- Поддерживающие процедуры необходимы для сохранения полученного результата
- Внимательно изучите инструкцию по применению продукта перед использованием

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Коробка: 1 шприц 3 мл + 2 иглы 30G
- Готов к применению
- Условия хранения: 2–30°C
- Апирогенный
- pH близок к нейтральному
- Изоосмолярный раствор

CYTOCARE S Line is a sterile single use medical device class III (CE 0123) manufactured by REVITACARE, indicated to reduce differently ageing effects linked to age, life style, or environment. The Glogau reference has selected to distinguish skin type as mild (I), moderate (II), advance (III) and severe (IV). CYTOCARE S Line improves skin quality for a short duration (filling fine lines, attenuating marked wrinkles, restoration of hydration and radiance, maintaining densification) of skin type (Glogau III and IV). For medical use. Read carefully CYTOCARE S Line Instructions For Use before using the product. CYTOCARE S Line must be injected in an aseptic manner, by duly doctor with a good knowledge of the anatomy and physiology of the area to be treated, with sterile and single use equipment supplied by REVITACARE. Before use CYTOCARE S Line, check the expiry date on the syringe labelling, the integrity of the primary packaging for the syringe and needles and the appearance of the solution. Store between 2°C and 30°C, away from the light in its original secondary packaging. Do not use if package is damaged. Once the syringe of CYTOCARE S Line has been opened, use it immediately. Discard the syringe, needles and the remaining product after use, in accordance with the guidelines in force for their disposal. Single use solution: do not re-sterilise and do not re-use. The doctor must inform the patient that there are potential adverse effects linked to the injection of this device, which occur immediately or are delayed. Adverse events observed with CYTOCARE S Line: - pain and bleeding during the injection - tingling, redness, inflammation, erythema and itching after the injection - bruise, oedema, nodule and swelling at the injection site - infection resulting from incorrect asepsis - low efficacy. The patient must inform the doctor as soon as possible if any other adverse events persist for longer than one week. The doctor must remedy it by an appropriate treatment. The distributor and / or manufacturer must be alerted to any other adverse event related to the injection of CYTOCARE S Line. Other adverse events observed in the literature concerning cross-linked hyaluronic acids or not, these potential risks should be taken into account: - small haematomas and allergic reaction - transient loss of sensitivity in the injected area, colouration or discolouration in the injected area and cases of necrosis in the glabellar region, abscess, granuloma, hypersensitivity and acne papules. This medical device is not reimbursed by health insurance organisation. This medical device is a regulated health product which, under this regulation, bears the CE marking.



Французская лаборатория Revitacare с 2003 года занимается разработкой и производством препаратов на основе гиалуроновой кислоты для эстетической медицины.

CYTOCARE S Line соответствует всем основным требованиям Европейской Директивы 93/42/ЕЕС относительно медицинских изделий.

КАЧЕСТВО БЕЗОПАСНОСТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

REVITACARE: сертификат EN ISO 13485.

Медицинские изделия класса III: маркировка CE.

Качество ГК: биотехнологический продукт.

Микробиологическая безопасность.

Биосовместимость в соответствии с международным стандартом ISO 10993.

Нецитотоксичный, неаллергенный, немутагенный, негенотоксичный.

Эффективность доказана клиническими исследованиями.

Произведен во Франции в соответствии с Правилами организации производства и контроля качества лекарственных средств (GMP).

YouBeLab
Youth and Beauty Lab

Официальный дистрибьютор в России ООО «ЮБИ ЛАБ»
125040, г. Москва, Нижняя ул., д. 14, с. 1, офис 03
Телефон: + 7 (499) 322-32-45; Email: Info@youbelab.ru