

ULTIGHT

Ultrasound Tightening Face & Body

Единственный в России
портативный беспроводной
аппарат ULTIGHT HIFU

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ SMAS-ЛИФТИНГ
НИКОГДА НЕ БЫЛ ТАК ДОСТУПЕН



ЧТО ТАКОЕ ULTIGHT HIFU

Единственное в России портативное беспроводное устройство HIFU представляет собой генератор микросфокусированного высокоинтенсивного ультразвука.

Имеет четкую степень нагрева, не травмирует поверхность кожи, работает в глубоких слоях.

В комплект входит основной блок управления – беспроводная манипула и три терапевтических картриджа с фокусной глубиной 3 мм, 4,5 мм, 6 мм (картридж 2 мм можно приобрести отдельно) с частотой ультразвуковых волн 7 МГц и тремя уровнями энергии.

Аппарат ULTIGHT включает в себя уникальные технологические решения, благодаря которым он является портативным устройством и отличается от других зарегистрированных аппаратов HIFU, представленных на рынке эстетической медицины. Применяется в мировой практике с 2018 года, зарегистрирован в РФ 18.09.2023.



УНИКАЛЬНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО ULTIGHT – ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДВИГАТЕЛЬ И ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ

Пьезоэлектрический двигатель аппарата ULTIGHT

- встроен в картридж и предотвращает дублирование или возможность подделки картриджа,
- обладает очень низким энергопотреблением,
- не требует охлаждения вентилятором (при работе не выделяется тепло), что значительно сокращает время процедуры.

При достижении указанного количества импульсов (10 000) аппарат автоматически прекратит работу, а дублирование (подделка) картриджа не будет возможной.

Введение более унифицированного датчика (7 МГц) позволяет его использовать для процедур на глубине 2,0 мм, 3,0 мм, 4,5 мм и 6,0 мм.

Регулируя фокусировку и мощность ультразвуковой волны, можно проводить процедуру как на лице, так и на теле (руки, бедра, живот) с гарантированной безопасностью.






ПРОЦЕДУРА НА АППАРАТЕ ULTIGHT

- Не травмирует поверхность кожи
- Задаёт четкую степень нагрева 55-60 градусов, благодаря сфокусированной УЗ-волне нагрев происходит точно в глубоких слоях
- Приводит к образованию точечных очагов коагуляции и, как следствие, к стимуляции синтеза коллагена
- Обеспечивает лифтинг тканей, увеличение эластичности и подтяжку кожи, разглаживание морщин

В итоге – улучшение тонуса кожи, устранение сети мелких морщин и естественный результат без побочных эффектов. Видимые улучшения после одного сеанса с использованием аппарата ULTIGHT!

ULTIGHT HIFU обеспечивает эффективную безболезненную нехирургическую подтяжку лица, лифтинг и отбеливание

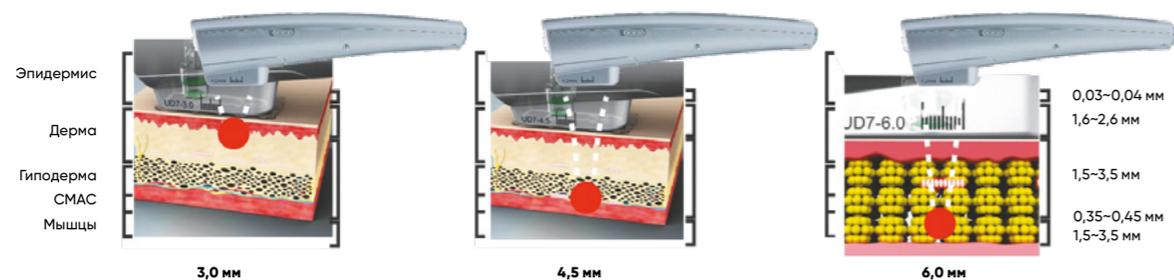

1. Лечебный эффект создается проникающим высокоинтенсивным сфокусированным УЗ (HIFU)

2. Излучаемая энергия концентрируется в дермальном слое (3 мм) и на уровне мышечно-апоневротического слоя (4,5 мм, 6 мм), создавая точки термокоагуляции

3. Немедленный эффект: сокращение кожи при подъеме температуры до 65 градусов в коагуляционных точках

4. Выработка коллагена и эластина для регенерации, повышения эластичности и эффекта лифтинга



Первое в мире портативное устройство HIFU, оснащенное пьезоэлектрическим двигателем (патент).

Повышенная безопасность лечения и удовлетворенность пациентов эффектом процедуры благодаря оригинальному (недублируемому и невоспроизводимому) картриджу.

Неинвазивная коррекция и стимуляция, обеспечивающие безопасный лифтинг и подтяжку кожи одновременно.

Особенная технология преобразования ультразвуковой волны M.P.T. (Metal Printing Technology) обеспечивает формирование зоны микрофокуса – все точки стремятся фокусироваться в одной зоне. В других аппаратах HIFU зона фокусировки является рассеянной и менее прицельной.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер	79,5 × 242 × 82,5 (мм)				
Вес	641 г				
Потребляемая мощность	DC5V				
Батарея	DC 7,2 В / 2500 мАч				
Картридж	Уровень	2,0 мм	3,0 мм	4,5 мм	6,0 мм
Параметры мощности	1	0,17 Дж	0,3 Дж	0,7 Дж	1,05 Дж
	2	0,25 Дж	0,45 Дж	0,85 Дж	1,2 Дж
	3	0,33 Дж	0,6 Дж	1,0 Дж	1,35 Дж

ULTIGHT

Ultrasound Tightening Face & Body

Во всех существующих устройствах HIFU используются шаговые двигатели, которые расположены внутри устройства, а не в картридже.

Аппарат ULTIGHT имеет пьезоэлектрический двигатель, расположенный непосредственно в картридже, который излучает ультразвук более точно, чем шаговый двигатель, и не выделяет тепло, а значит, не требует охлаждения.

Важной особенностью и гарантией качества процедуры на аппарате ULTIGHT HIFU является невозможность подделки или стороннего воспроизведения картриджа.

Правильная передача ультразвука и более точный выстрел позволяют сократить в 1,5 раза время процедуры*.



ОСНОВНОЕ УСТРОЙСТВО

Полное время зарядки: около 3 часов

Время непрерывного использования: более 60 минут

Количество импульсов при непрерывном использовании: более 2500 выстрелов



ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

Автоматическая зарядка при подключении к USB-порту

Автоматическая стерилизация встроенной UV-лампой при подключенном зарядном устройстве

* По сравнению с процедурами на аппаратах с шаговым двигателем.

СИСТЕМНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Глубина	2,0 мм	3,0 мм	4,5 мм	6,0 мм
Преобразователь	7 мГц			
Количество выстрелов	10 000			
Скорость	1 выстрел/сек			
Интервал	0,1 мм			
Мотор	Встроенный пьезоэлектрический мотор			
Область применения	Лицо		Живот, бедра, предплечья, ягодицы	

ЦЕННОСТЬ ДЛЯ КЛИНИКИ

Стоимость аппарата в несколько раз ниже всех остальных HIFU аппаратов на рынке

Быстрая окупаемость ULTIGHT и возможность гибкого ценообразования для привлечения новых клиентов

Компактность аппарата позволяет переносить его в любой кабинет для минимизации времени простоя оборудования

Безболезненность процедуры позволяет предлагать услугу безоперационного SMAS-лифтинга гораздо большему количеству клиентов

Возможность использования в различных зонах лица и тела

Доступная стоимость расходных материалов

Мгновенный видимый эффект для удовлетворенности клиентов

3 терапевтических картриджа уже в комплекте

Исследования позволяют рекомендовать процедуру как эффективную и безопасную

ЦЕННОСТЬ ДЛЯ ВРАЧА

Аппарат готов к использованию сразу после включения

Процедура беспроводной манипулой комфортна для врача

Быстрая скорость выстрела сокращает привычное время процедуры SMAS-лифтинга

Клиент не испытывает негативных ощущений от процедуры

Мгновенный видимый результат позволяет наладить с клиентом долгосрочное сотрудничество

Отсутствие последующего восстановительного периода дает возможность расширения круга клиентов

ЦЕННОСТЬ ДЛЯ ПАЦИЕНТА

Возможность заменить операционную процедуру неинвазивным аппаратным SMAS-лифтингом

Мгновенный видимый результат, не требующий последующего восстановительного периода

Накапливаемый результат в течение 2 лет

Безболезненность процедуры позволяет ее рассмотреть клиентам с высоким болевым порогом

РЕЗУЛЬТАТЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ MFU НА АППАРАТЕ ULTIGHT ДО ПРОЦЕДУРЫ И ЧЕРЕЗ МЕСЯЦ



до

после



до

после



до

после



до

после



до

после



до

после

ЭФФЕКТ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ULTIGHT

Увеличение синтеза эластина и генерация коллагена

Активация клеток кожи




Уменьшение эффекта нависшего века

Повышение эластичности кожи лица и тела

Уменьшение размеров двойного подбородка

Уменьшение объемов жировых пакетов

Уменьшение морщин, в том числе мелких

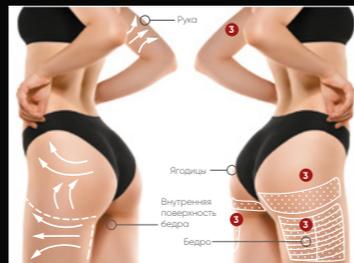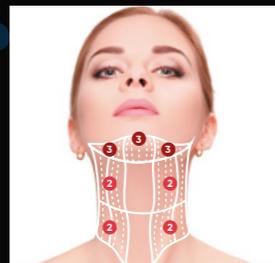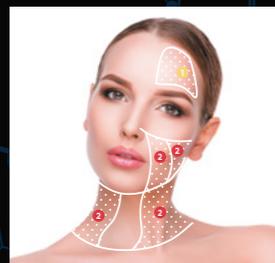

- 1 3,0 мм
- 2 4,5 мм
- 3 6,0 мм



ULTIGHT

Ultrasound Tightening Face & Body

Воспользуйтесь уникальным
преимуществом ULTIGHT HIFU
для развития своего бизнеса

+7 (495) 799 6 288
www.lotosgroup.org

